


Important Before You Start: THIS IS AN ACCESSORY “QUICK SET-UP” GUIDE ONLY

Please refer to the *Dabir Operation / Service Technical Manual* for full System set-up and usage instructions. Failure to carefully read and follow all instructions and safety information may result in decreased product performance or injury.


Battery Insertion & Charging Instructions:

1. Remove battery from packaging. (**NOTE: INITIAL CHARGING WILL TAKE UP TO 2 HOURS.**)
2. Insert bottom of battery into the controller pocket, then pivot inwards until an audible “CLICK” occurs. It is important to note that the battery can be installed while the controller is either ON or OFF. The controller does not need to be ON to charge the battery, but it must be plugged in.
3. When properly connected, the battery icon will appear. If the icon is not present, battery is NOT properly connected and Step 2 MUST be repeated.

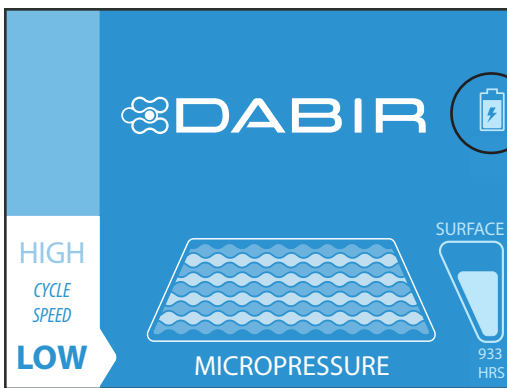

Step 3: Battery Icon Check

- Connected & Charging
- Charge Level
- = Low Charge (Yellow)
- = Battery Defective

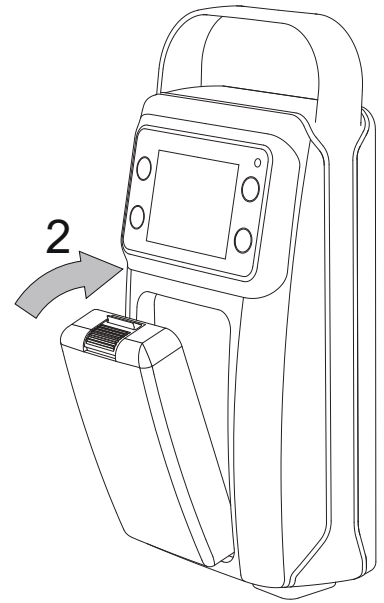

NOTE: The Battery will automatically charge when AC power is supplied to Controller.


Battery Removal:

NOTE: After battery removal, controller MUST be connected to AC power source to maintain session.

4. To remove battery from controller, grip the battery by its sides and depress the orange button.
5. Rotate battery outward and remove as shown.

Checking Battery Charge Level:

6. Press “PUSH TO TEST”, to activate charge level LED indicator.


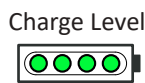


NOTE:

It is the responsibility of the user to properly clean and disinfect the System prior to patient use.

Cleaning Procedure: www.dabir-surfaces.com/IFU

Approved Cleaners: www.dabir-surfaces.com/cleaners

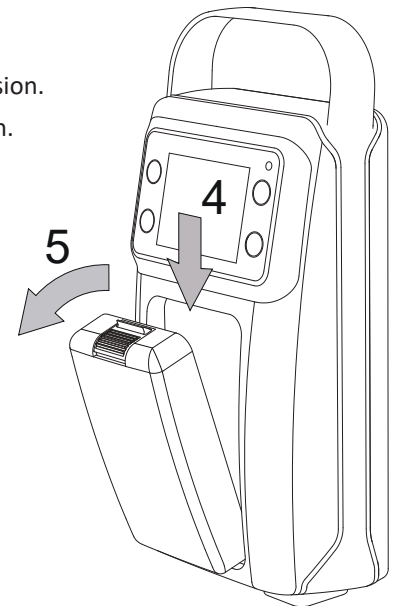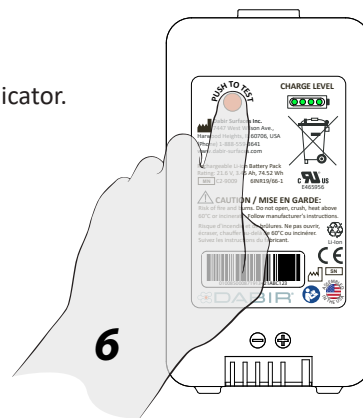

Corporate Headquarters, Sales & Manufacturing:

Dabir Surfaces, Inc.

Sales Inquiries:

Technical Support:

Authorized European Representative:

PATENT:

Distributor (North America): STERIS Corporation, Customer Service, Tel: +1(800)548-4873, Fax: +1(440)639-4450; Service Support, Tel: +1(800)333-8828

DOC# R02-0006-00121-FA

7447 West Wilson Ave., Harwood Heights, IL 60706, USA, www.dabir-surfaces.com

sales@dabir-surfaces.com, Tel: +1(888)559-3641

support@dabir-surfaces.com, Tel: +1(888)559-3642

Emergo Europe, Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands

www.dabir-surfaces.com/patents




Important avant de commencer : CE DOCUMENT N'EST QU'UN GUIDE D'« INSTALLATION RAPIDE »





Veillez consulter le *Manuel technique d'utilisation et d'entretien Dabir* pour les instructions complètes de configuration et d'utilisation du système. Le fait de ne pas lire et de ne pas suivre attentivement toutes les instructions et les informations de sécurité peut entraîner une diminution des performances du produit ou des blessures.

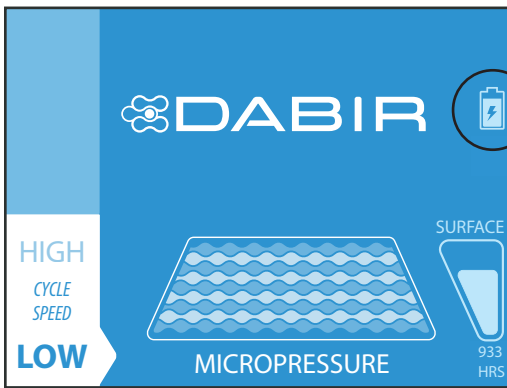
Instructions pour l'insertion et la recharge de la batterie :

1. Retirez la batterie de l'emballage. (REMARQUE : LA CHARGE INITIALE PRENDRA JUSQU'À 2 HEURES.)
2. Insérez la partie inférieure de la batterie dans la station de recharge, puis faites pivoter le haut de la batterie vers l'intérieur jusqu'à ce qu'un « CLIC » se fasse entendre. Il est important de noter que la batterie peut être installée lorsque le contrôleur est en position ON (Marche) ou OFF (Arrêt). Le contrôleur n'a pas besoin d'être en position ON (Marche) pour recharger la batterie, mais il doit être branché.
3. L'icône de la batterie apparaît lorsque la connexion de recharge est correctement établie. Si l'icône n'apparaît pas, la batterie n'est PAS correctement connectée et l'étape 2 DOIT être répétée.



Étape 3 : Vérification de l'icône de la batterie

-  Connecté et en cours de recharge
-  Niveau de charge
-  = Low Charge (Yellow)
-  = Battery Defective

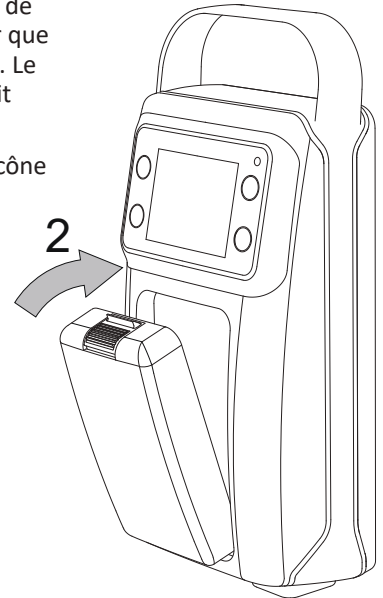

REMARQUE : La batterie se recharge automatiquement lorsque le contrôleur est alimenté en courant alternatif.

Retrait de la batterie :

REMARQUE : Après le retrait de la batterie, le contrôleur DOIT être branché à une source d'alimentation CA pour continuer la session.


4. Pour retirer la batterie du contrôleur, saisissez les côtés de la batterie et appuyez sur le bouton orange.
5. Faites pivoter la batterie vers l'extérieur, puis retirez-la comme indiqué.

Vérification du niveau de charge de la batterie :

6. Activez les témoins lumineux de niveau de charge en appuyant sur le bouton « PUSH TO TEST ».



Niveau de charge


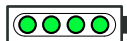


REMARQUE :

L'utilisateur est responsable de nettoyer et de désinfecter correctement le système avant son utilisation par le patient.

Procédure de nettoyage : www.dabir-surfaces.com/IFU

Produits de nettoyage approuvés : www.dabir-surfaces.com/cleaners

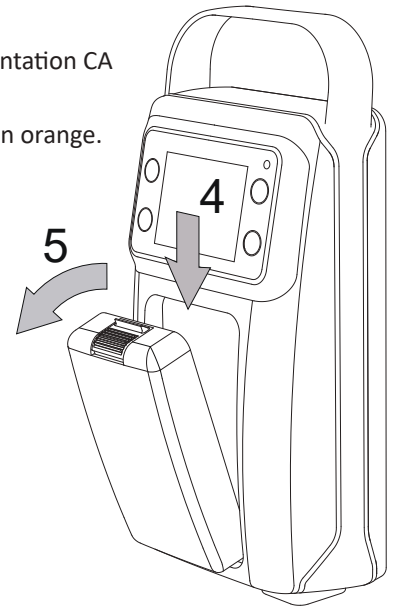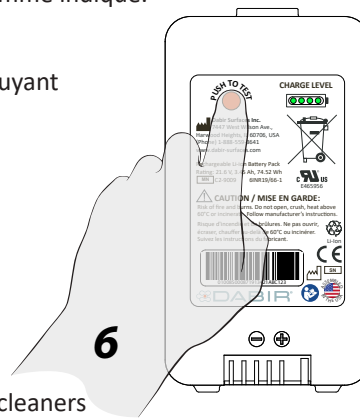

Siège social, ventes et fabrication :

Dabir Surfaces, Inc. 7447 West Wilson Ave., Harwood Heights, IL 60706, États-Unis, www.dabir-surfaces.com

Demandes de renseignements concernant des achats : sales@dabir-surfaces.com, Tél. : +1 (888) 559-3641

Assistance technique : support@dabir-surfaces.com, Tél. : +1 (888) 559-3642

Représentant autorisé dans l'Union européenne : Emergo Europe, Westervoortsedijk 60, 6827 AT Arnhem, Pays-Bas

BREVET : www.dabir-surfaces.com/patents

Distributeur (Amérique du Nord): Société STERIS, Service Clients, Tél. : +1(800)548-4873, Fax: +1(440)639-4450; Service après vente, Tél. : +1(800)333-8828

DOC n° R02-0006-00121-FA

